

JØHL

Loftlift JH270



Loftlift JH 270

Den kompakte loftlift med ekstra funktioner...

Den nye JH 270 er en loftlift med verdens klasse design og "state of the art" funktioner som tilbyder sikker, stabil og effektiv løft og forflytning for både plejeger og modtager. Sammen med det store udvalg af skinner og tilbehør tilbyder JH 270 den perfekte løsning på alle tænkelig loftlift behov.



- Løftekapacitet 270kg
- Lav profil på både liftmotor og løfteåg giver max løftehøjde
- Soft start og stop
- Ladning gennem skinneresystem, håndkontrol eller ladeport


Pneumatisk håndkontrol har derfor ingen stik/ledning der kan gå i stykker.

Polstret løfteåg med 6 sejl-kroge som standard, kan af- og påsættes uden brug af værktøj så det er nemt at skifte til eksempelvis et 4-punkt løfteåg.




Displayet giver vigtig information for både bruger og tekniker

- Lift tæller
- Hvilken liftoperation bliver udført (op/ned etc.)
- Lade status – lav batteri indikator lyd & visuelt
- Ladeindikator – "return to charge" (tilvalg)
- Diagnostik funktion for tekniker

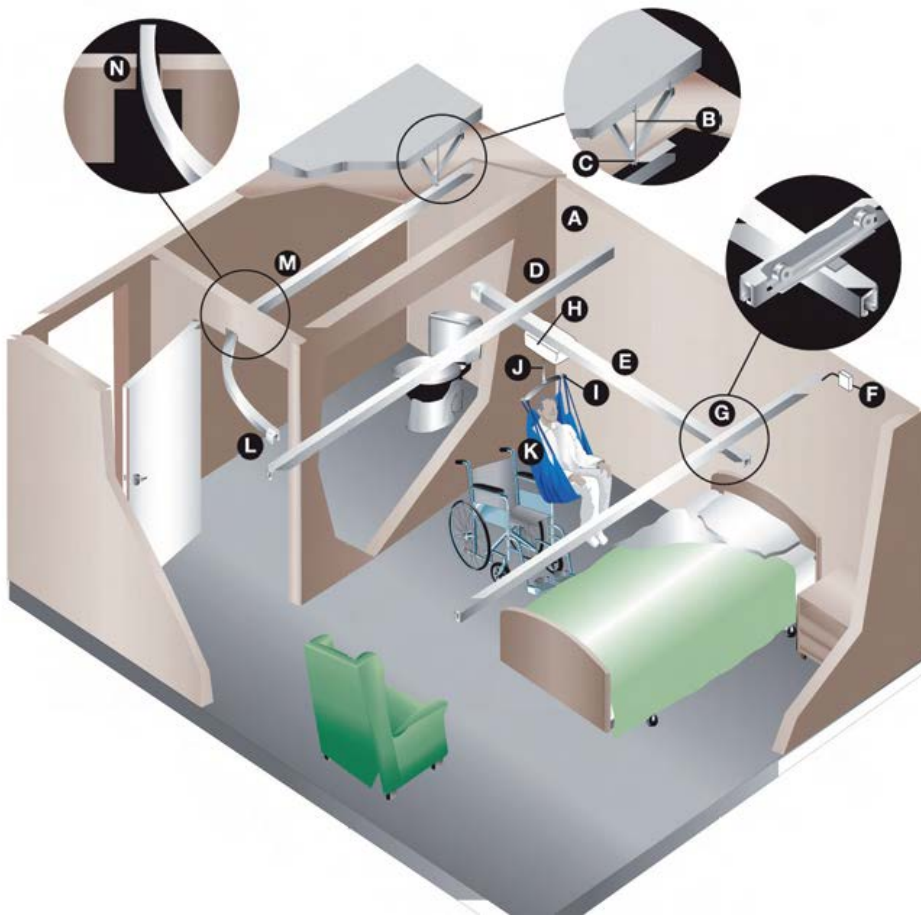

- A:** nedhængt loft
- B:** genvindstag/pedel
- C:** befæst i skinne
- D:** fast bære-skinne
- E:** travers-skinne
- F:** lade-port
- G:** travers-system
- H:** løfte motor
- I:** løfte-åg
- J:** løftebånd
- K:** løfte sejl
- L:** rum til rum port
- M:** skinne til indbygning
- N:** special dør

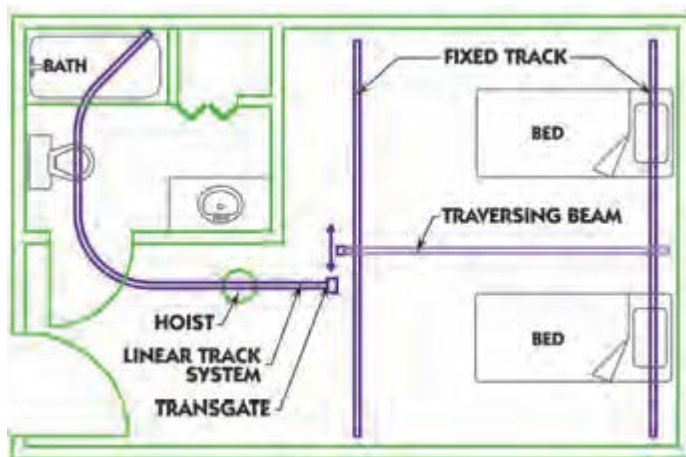

Enkeltskinne-system måske med kurve, traversskinne-system, monteret på loft, med vægbeslag eller på stativ?.


Skal skinne skjules i loft?

Ladning gennem skinne, håndkontrol eller ladeport?

Mobil eller fast løfte motor?

Mulighederne er mange men uanset hvilken løsning du måtte ønske kan vi hjælpe.

Kontakt os og lad os sammen finde den helt rigtige løsning

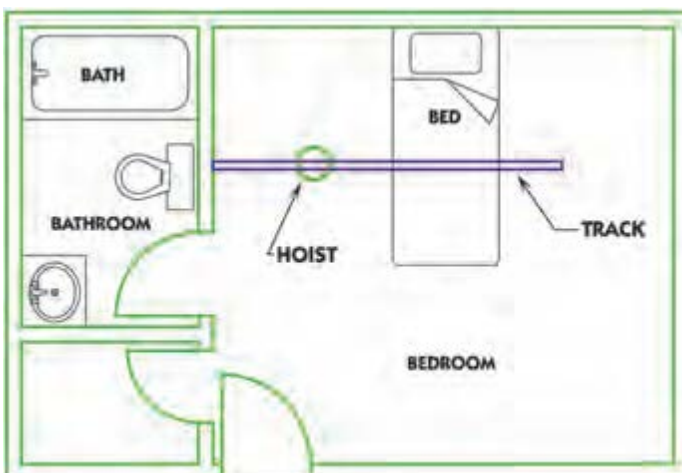

Mulighed for gardin spring



Som standard unik 3 krogs løfteåg, andre størrelser kan fås.

Nem ladning gennem skinne/i port eller håndkontrol



Manuel nød-fir, kan både hejse op og ned!

Rum til rum port både til travers eller enkelt skinne



Elektrisk eller manuel turntable


Pneumatisk ergonomisk håndkontrol



Mulighed for andre hjul så liften passer til andre skinne-fabrikanter

Specifikationer

Max løft 270kg	Løfthastighed 0,15M/S
Antal løft før genopladning med 85kg ca. 65 løft	Batterier 2 x 12V 5AMP
Ladetid af helt tomt batteri ca. 8 timer	Lader : IP 67 rated
Lift vægt 9,7kg	Lift interval op til 2070mm

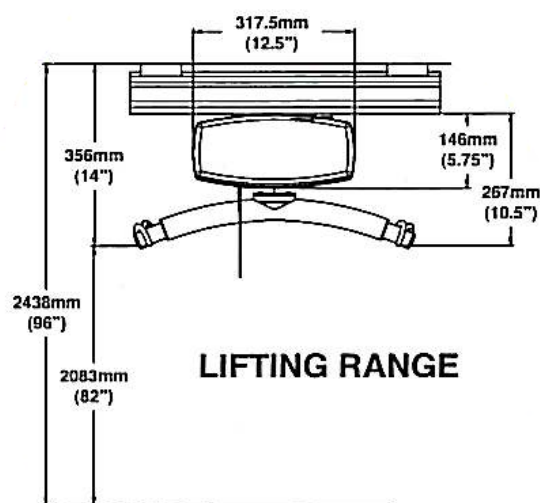

Firskovvej 6 – 2800 kgs. Lyngby – Denmark – telefon +45 39 20 20 07

Info@johlhumancare.dk – www.johlhumancare.dk